

製造販売元 株式会社 近畿レントゲン工業社
Since 1946 Kyoto, Japan

本社 〒602-0029 京都市上京区室町通上立売上る室町頭町259
TEL 075-441-3234 FAX 075-415-0364

東京オフィス 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル9F
TEL 03-6450-0933

名古屋オフィス 〒454-0844 名古屋市中川区葉池町1-8 C号
TEL 052-665-6385

<https://www.x-raykinki.co.jp>

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがございます。

特約店



CAUTION



AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY
RADIOLOGICAL CONTROLS REQUIRED
TO WORK ON SURFACE

**RADIOACTIVE
MATERIAL
DO NOT OPEN**

お問い合わせ



製品ページ

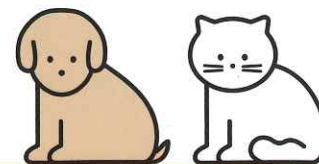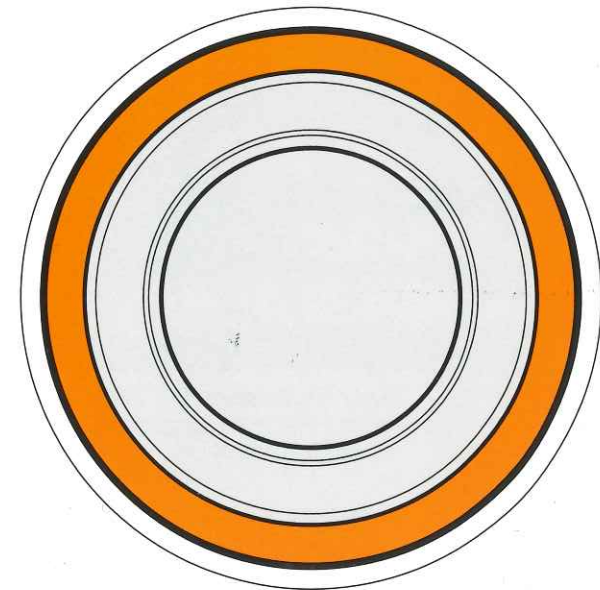

動物用ポータブルX線装置



AirRay

KINKI ROENTGEN INDUSTRIAL CO., LTD.



※実寸大です

KRK

AirRay

動物用医療機器基準に適合

軽量でワイヤレスの ポータブルX線装置 AirRayエアレイ



より軽量な新製品

70kV/2mAの高出力はそのままに、
当社史上最軽量の1.9kgを実現しました。
※後方散乱シールド取付時2.2kg

長寿命バッテリー

1回の充電でおよそ100回の照射が可能です。
※照射時間によって変動します。



高解像度画像

安心の国内メーカーX線管を採用。
0.4mmのX線焦点により、シャープでクリアな画像を生成できます。
管電圧70kVで透過性に優れ、照射時間を短縮できるため撮影時の負担を軽減します。

高い安全性

内部シールドおよび後方散乱シールド(※オプション)により撮影者を保護します。

多様な互換性

お手持ちのX線フィルム、CCD/CMOSセンサー、IPなどをご利用になれます。

付属品・オプション品

付属品として有線の照射スイッチと持ち運びに便利なキャリーケース、
オプション品として後方散乱シールドや三脚・ネックストラップがございます。



※三脚はオプションです。



後方散乱シールド
(※オプション)



専用ケース

Technical Data

分類: 動物用医療機器
 一般の名称: 可搬型 X線診断装置
 販売名: エアレイ 承認番号: 農林水産省指令4動薬第1099号

項目		仕様
入力電源	機器電源	Li-po/バッテリー
	充電アダプター電源	AC100-240V 50/60Hz 1.0A
バッテリー仕様		DC11.1V 1500mAh
管電圧/管電流		70kV/2mA (固定)
X線撮影時間		0.01~1.30sec
X線管	モデル名	D-041 SB (キャノン電子管デバイス製)
	焦点	0.4mm
総ろ過		1.5mmAl
寸法		165(W) x 235(D) x 155(H) mm
重量		1.9kg